


TEKNOMAR[®] GROSS – LAB CHEMOCELL LRCx MAKROSKOPİ KABİNİ

CHEMOCELL LRCx makroskopi kabini, makroskopi ve disseksiyon işlemlerinin kolayca yapılabilmesi için uygun ve ergonomiktir.

- Gross işlemi sırasında oluşan formaldehit gazını, ortama yaymadan ve özellikle kullanıcıya ulaşmadan, debisi **500- 2500** metreküp/saat olan *fan sistemi* ile emerek dışarı atma,
- **1000 - 12.000** lümenlik (kullanıcı seçenekli) floresan lamba ile kabin içi aydınlatma
- Sterilizasyon amaçlı kabin içi UV lamba.

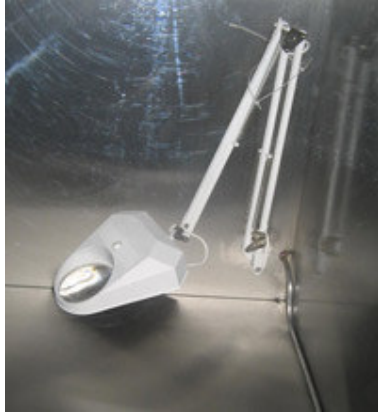

- İnfrared Sensör kontrollü *Su fiskiyeleri* ile çalışma alanını yıkayabilme (Yıkama kolaylığı açısından fiskiye sayısı 20 dir.),
- Kabin içinde çalışma yüzeyinin üstüne sabitlenmiş, esnek sapı sayesinde serbest hareket eden ışıklı *büyüteç* ,
- İnfrared sensör ile el değmeden açılıp kapanabilen; sıcak ve soğuk suya bağlı su bataryası,
- Durulama suyu ve atıklar için lavaboda yer alan infrared sensör ve manuel kontrollü *atık öğütme* sistemi,
- İnfrared sensör kontrollü *Havalandırma / Emiş gücü ayarı* ,
- Karbon ve HEPA Plenium sistemi ile sızdırmaz ve her noktada eşit hava hızı,
- Elektronik kontrol sistemli ön kapak açma kapama (koku için UV geçirmez ve kırılmaz sistem %50 kapanabilir) ,
- 24 saat kesintisiz çalışabilme,
- Mikroişlemci kontrollü digital ve dokunmatik panel ile çalışma değerlerinin takibi,

Firmamızın, teknolojik gelişmeler ve değişimler nedeniyle ürettiği cihazlar üzerinde spesifikasyon, tasarım ve biçim değiştirme hakkı saklı tutulmaktadır.

TEKNOMAR[®] GROSS – LAB CHEMOCELL LRCx MAKROSKOPİ KABİNİ

...Fiziksel Özellikler;

- Dış yüzey isteğe bağlı 304 kalite paslanmaz çelik veya epoksi boyalı ,
- İç çalışma yüzeyi 316 paslanmaz çelik, .
- **120-150-180-210 cm** çalışma alanı (standart üretim seçenekleri) ,
- Derinlik 65- 85 cm,
- Çalışma alanı, yerden yüksekliği; 90 cm. *Cihazın kendisine ait ayarlı ayakları mevcuttur*
- Kabin içinde bulunan lavabonun ebatları, 30x35x15 cm (opsiyonel)

CHEMOCELL LRCx Makroskopi cihazı modüler yapıda olup, demonte şekildedir.

Labaratuvara kolaylıkla alınabilir ve montajı yapılabilir.

...Elektronik donanım;

Kabin içerisinde elektronik olarak kontrol edilen fonksiyonlar elektronik arızası durumunda bağımsız komütatörler ile **manuel olarak** kontrol edilebilmekte ve işler durmamaktadır.

- Elektrik kaçaklarından doğabilecek şoklara karşı özel devre kesici emniyet sistemi.
- Kaçak akım rölesi ve kaçak akım sigortası.



“...Opsiyonel Özellikler:

Manyetik askılık, havlu kağıt askısı,

Milimetrik cetvel, (çalışma alanına monte edilebilir,

paslanmaz çelik özelliklerde), formalin tankı (musluklu), koruyucu şeffaf ayraç, kefeli elektronik tartı, kabin içi raf, kabin altı sürgülü çekmece yada dolap (paslanmaz çelik özellikte veya epoxy boyalı) .”

“...Görüntüleme Sistemi (Opsiyonel) : İsteğe bağlı olarak cihaza görüntüleme ve ses sistemi eklenebilmektedir.”

SİZE ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ...



Firmamızın, teknolojik gelişmeler ve değişimler nedeniyle ürettiği cihazlar üzerinde spesifikasyon, tasarım ve biçim değiştirme hakkı saklı tutulmaktadır.

TEKNOMAR[®] LTD. ŞTİ.

www.teknomar.com.tr